


振動式体温計 PRO-M
KJT0307
取扱説明書

品質保証書付

B55-1

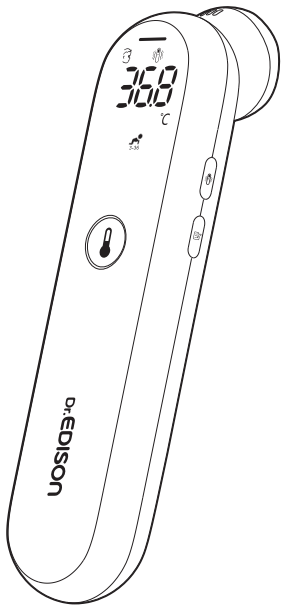

このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくため、ご使用前に本書を必ずお読みください。読み終わった後も大切に保管してください。
ご使用中は、必ず本書をお手元に置いてください。

安全上の注意

ここに示した内容は、製品を安全に正しく安全にお使いいただき、ご使用になる方及び他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。
表示と意味は、次のようになっています。

	危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。
	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
	注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。
		禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
		必ず行うことを示す記号です。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

危険

	本製品を分解・修理・改造しないでください。火災・感電・けがの原因になります。
	本製品のバッテリーを他の機器に使用しないでください。 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しないでください。 バッテリーを、火に投げ入れたり、加熱したりしないでください。 バッテリーを、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。 バッテリーを水につけないでください。 発熱・破裂・液もれ・火災・けがの原因になります。
	バッテリー液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗ってください。目に傷害が発生するおそれがあります。 洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。

警告

	水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しないでください。また、本製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。火災・感電の原因になります。
	測定結果による自己診断はしないでください。症状の悪化につながる場合があります。必ず、医師の診察を受けてください。
	製品に異常がある場合は使用しないでください。(煙が出ている、異臭がする、内部に水や異物が入った、落としたり破損したりしたなど) けがの原因になります。
	バッテリー液がもれたときは使用しないでください。引火のおそれがあります。直ちに火気から遠ざけてください。 皮膚や被服についたときはすぐに洗い流してください。皮膚炎や被服の損傷の原因になります。
	火気や熱器具の近くに放置しないでください。発火・爆発・火災の原因になります。
	指定以外の方法で充電しないでください。火災・感電の原因になります。
	本体の充電端子、専用充電ケーブルの充電端子のマグネット部分に、ヘアピンやクリップなどの金属片が付かないようにしてください。火災・感電の原因になります。

注意

	子供や取り扱いに不慣れな方だけで使わせしないでください。けがの原因になります。
	ほこりが多い場所、高温多湿の場所で、使用・充電・放置をしないでください。火災の原因になります。
	測定部位に疾患やけががある場合は、本製品を使用しないでください。疾患やけがが悪化させる場合があります。
	測定ガイドの光は目に入らないように注意してください。目に傷害が発生する場合があります。
	複数の人で共用するときは、ウィルス感染予防のため、毎回必ず本製品をアルコールティッシュなどで拭いてください。

使用上の注意


体温測定に関する注意

- 容態など気がかりな点がある場合は、測定した体温だけで判断せず、必ず医師の診断を受けてください。
- 医師に体温を知らせるときは、額で測定したものであることを伝えてください。
- 額とその他の部分では測定温度が異なる場合があります。普段から、脇下など他の部分での測定と同時に、本製品による額の測定も行い、それぞれの平熱を知っておいてください。
- 人の額以外では使用しないでください。本製品は人の額で温度を測定するように設計されています。他の場所で測定すると、正しい結果が得られないことがあります。
- 測定温度に疑問があるときは、念のため他の体温計でも測定してください。
- 運動後、入浴後、飲食後、帰宅後は正しく測れないことがあります。
- 水泳や入浴の後、または汗などで測定部位が濡れているときは、正しく測定できない場合があります。
- 測定は、少なくとも3回行い、最も高い値を使用することをお勧めします。

その他の注意

- 測定部のレンズを手で触ったり、息を吹きかけたりしないでください。レンズの破損や汚れにより、正しい測定結果を得られない場合があります。
- 人以外に使用しないでください。動物に使用しても正しい結果は得られません。
- センサー部を掃除するときは、アルコールを含ませた綿棒でレンズを優しく拭いてください。強くこするとレンズに傷がつくおそれがあります。
- 本製品は防水ではありません。水に濡れると、誤動作や故障の原因になります。
- 充電中は使用できません。
- テレビ・電子レンジ・携帯電話などの近くでは、誤動作する場合があります。

各部の名称

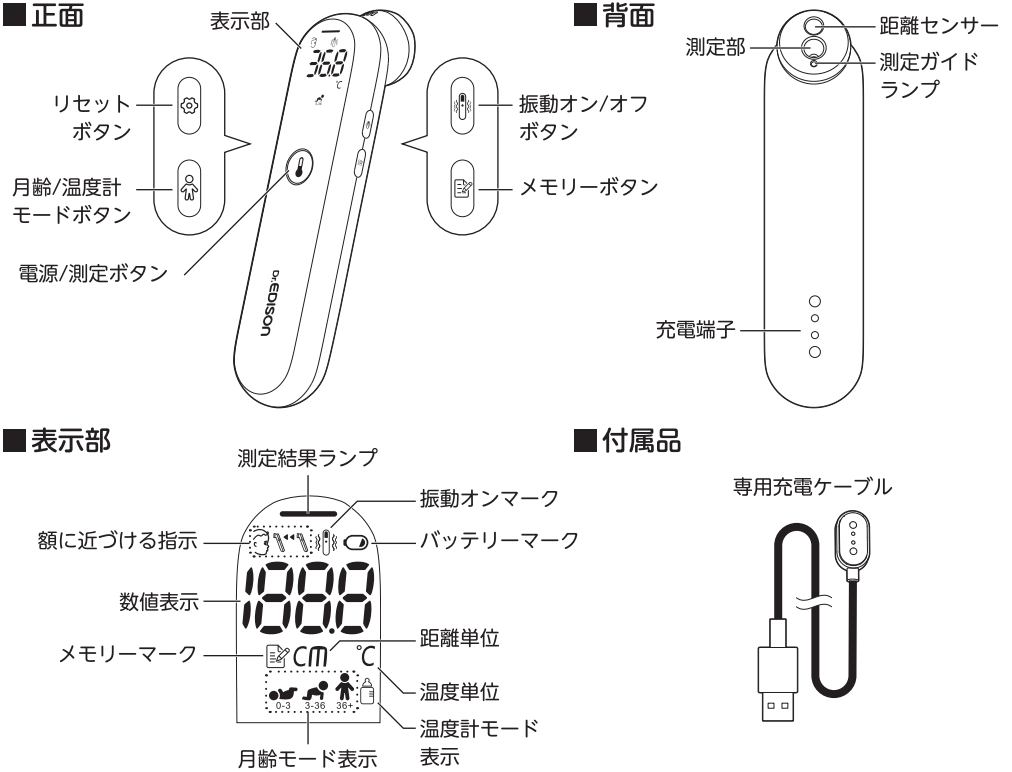

保証規定について

お買い上げ後、製品名・お買い上げ日・お客様名、販売店名を直ちにご記入願います。

品質保証書	
保証規定 1) 一度ご使用した製品は、原則としてお取り替えできません。 2) 保証期間は正常な使用状態において、お買い上げの日から1年間です。 3) 万が一、保証期間中に故障や異常が生じた場合は、無償で修理または交換をいたします。お電話にて弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。 4) 製造上の不備が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。 5) その他の場合は適正な価格にて修理させていただきますので予めご了承ください。 6) 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できない場合があります。 7) 保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.) 8) 保証書は再発行致しません。大切に保管してください。	
製品名	皮膚赤外線体温計 振動式体温計 PRO-M
保証期間	お買い上げより1年間(ただし保証規定による)
お客様	お名前
	ご住所 〒 TEL
販売店	店名
	住所 〒 TEL
保証期間内でも以下の項目に該当する場合は、保証の対象外となり、有償での修理となります。 ●素材の経年劣化や摩耗による損害など製品の寿命 ●お客様による分解、修理、改造を行った場合 ●取扱説明書で禁止されている取り扱いによる故障 ●不慮の事故による製品の故障 ●他社製品との組み合わせによる故障 ●火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、腐食、異常電圧およびその他の天災地変による故障および損害 ●お買い上げ後の輸送、落下やその他衝撃による部品の変形や破損 ●保証書にお買い上げ年月日、販売店名などが記入されていない場合および保証書の記載内容又は字句が書き直されている場合 ●修理依頼の際に保証書が添えられていない場合	

製造販売業者：株式会社ケイジェイシー
〒140-0001 東京都品川区北品川 1-10-4 Y.B.ビル
製造業者：Hetaida Technology Co.,Ltd.




商品詳細や
使い方動画はこちら

お問い合わせはこちら

カスタマーセンター 0120-415-553
年末年始・長期連休期間を除く 9:00-17:00
※土日祝は電話がつながりにくい場合があります

充電/測定前の準備

■充電

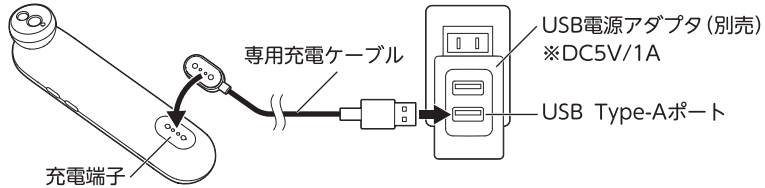


1 必ず電源は切った状態にしてください。

専用充電ケーブルを本体とUSB電源アダプタに接続します。


- 充電が開始されると、表示部には充電中を示す表示、バッテリーマークが点灯します。
- 満充電になると、充電中を示す表示は全て点灯の状態になります。
- 残量が少なくなると、バッテリーマークが点滅します。早めに充電してください。

充電を開始すると

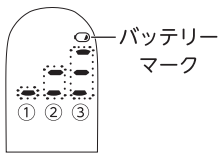


①②③が順番に点灯し、繰り返します。

満充電

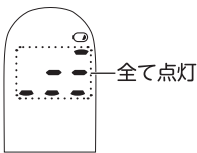

全て点灯

残量が少なくなると

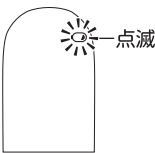

一点滅

2 充電が完了したら、USB電源アダプタをコンセントから抜き、専用充電ケーブルを本体から外してください。

■測定前の準備

- 額に、髪の毛/汗/化粧品/帽子などがかかっていることを確認してください。
- 本製品の動作温度範囲は5.0～40.0℃です。測定する部屋に本製品を30分以上なじませてから検温してください。普段から実際にお使いになる部屋に保管してください。
- 発熱などにより額や頭を冷やした場合は、正しく測れません。
- エアコンやヒーターなどの風が当たらず、周囲の温度が安定しているところで測定してください。
- 直射日光の当たらないところで測定してください。

使いかた

■体温計モード

1 電源/測定ボタンを1回押します。待機画面が表示されます。


2 月齢を設定

月齢/温度計モードボタンを押して、体温を測定する相手の月齢に設定します。

3 測定


部分測定

- 待機画面のまま、測定ガイドランプを額の中心に当て、1～3cmの距離まで測定部を額に近づけてください。(約2秒)

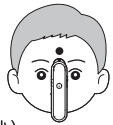


範囲測定

- 電源/測定ボタンを長押ししながら、測定ガイドランプを額に当て、1～3cmの距離まで測定部を額に近づけて、額の範囲内をゆっくりスライドさせてください。(約4秒)

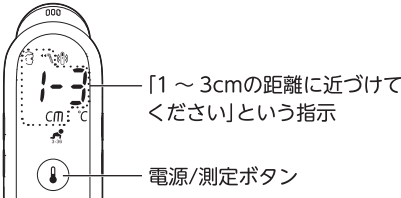

「1～3cmの距離に近づけてください」という指示

電源/測定ボタン

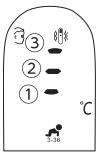

測定できている場合は、左図のように①②③が順番に点灯します。

4 測定が完了すると、表示部に測定温度が表示され、測定結果によって測定結果ランプの色が変わります。

測定結果ランプ



測定温度

- 測定値が32.0℃未満の場合は、Loが表示されます。
- 測定値が43.0℃を超えると、Hiが表示されます。

■測定ガイドランプについて


- 電源が入ると、測定ガイドランプが点灯して、測定する部位を照らします。照らされた光を見て、角度などを調整してください。

OK	要調整		
光がきれいな円になっている	光が楕円になっている	光の輪郭がぼやけて縁が見えない	光が髪の毛などに当たって円が見えない
1～3cmの距離では、およそ直径5～15mmの円になります。	斜めになっているので角度を調整してください。	距離が離れているので、近づけてください。	光を遮るものがないようにしてください。

■温度計モード

1 電源/測定ボタンを1回押して、待機画面にします。

その状態で年齢/温度計ボタンを長押しすると、表示画面右下に℃マークが表示されます。℃マークが温度計モードの状態です。
※1度電源が切れると、体温計モードに戻ります。

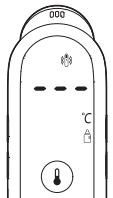

2 測定部を測定物から1～3cmまで近づけて、電源/測定ボタンを1回押します。

※温度計で物を測る場合は、内部の温度を測定するのではなく表面の温度を測定します。ミルクや離乳食やお風呂などはよくかき混ぜてから測定してください。

※お風呂など湿気が多い場所で使用した後は、速やかにその場から離れ、水気などは拭き取ってください。本体を濡らさないようにご注意ください。



3 測定が完了すると、表示部に測定結果が表示されます。温度の測定結果はメモリーには保存されません。温度計モードでは、測定結果ランプの色は全て緑色になります。

- 測定値が0.0℃未満の場合は、Loが表示されます。
- 測定値が100.0℃を超えると、Hiが表示されます。

■月齢モードを切り替える

- 月齢/温度計モードボタンを押すたびに、月齢モードが切り替わります。
- 月齢モードの切り替えは記憶され、次に電源を入れたときも同じモードになります。




■メモリー機能

- 測定した温度は、メモリーに保存され、呼び出すことができます。(温度計モードでは保存されません。)
- メモリーは、50個まで保存されます。

1 電源を入れ、メモリーボタンを押します。

- 最新のメモリー(メモリー1)が呼び出されて表示されます。

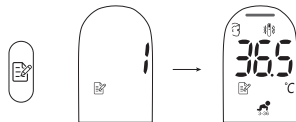

2 振動オン/オフボタンで新しい順に、メモリーボタンで古い順に、次のメモリーが呼び出されて表示されます。・・・3→2→1→50→49・・・

■電源をオフにするには

- 電源は一定時間操作をしないと、自動でオフになります。

■メモリーの消去

- メモリーボタンを長押しすると、全てのメモリーが消去されます。



■振動をオン/オフするには

- 振動オン/オフボタンを押すたびに、振動のオン/オフが切り替わります。
- 振動がオンになると、表示部に「V」(振動オンマーク)が表示されます。



■初期状態に戻すには


- リセットボタンを長押しすると、全ての設定とデータは消去され、初期状態に戻ります。



お手入れ/保管/廃棄

■お手入れ

- 使用後は、アルコールティッシュなどで拭いてください。
- 距離センサー、測定部はアルコールで湿らせた綿棒で優しく拭いてください。

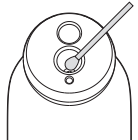

■保管

- 長期保管する場合は、バッテリーの劣化を防止するために、十分充電してください。保管中も、6か月に1回程度充電し直してください。
- -20.0～55.0℃で、ほこりや湿気のない場所に保管してください。

■廃棄

- 本製品はバッテリーを内蔵しているので、一般のごみとして廃棄することはできません。自治体などで設置する小型家電廃棄場所へお持ちください。
 - ※ バッテリーは、充電量を0にしてください。
 - ※ 内蔵のバッテリーは取り出す必要はありません。
 - ※ 充電端子はテープで塞ぎ、絶縁してください。
- 回収されるのは本体のみです。ケーブルなどの付属品は、金属として、お住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。内容については、各自治体にお問い合わせください。

故障かなと思ったら

症状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない	バッテリー残量がありません。	専用充電ケーブルを使用して充電してください。
	充電中は電源が入りません。	充電が完了してから、専用充電ケーブルを外して使用してください。
充電できない	専用充電ケーブルがしっかり接続されていません。	専用充電ケーブルを本体の充電端子にしっかり接続してください。 専用充電ケーブルのUSB端子を、電源のUSBポートにしっかり接続してください。
	本体が満充電になっています。	満充電になったときは、充電は停止します。
測定できない (“ ” “ ” が表示される)	距離が離れています。	“ ” “ ” が消えるまで近づけてください。(およそ1～3cm)
Errが表示される	周囲温度が5.0℃以下、または40.0℃以上です。	使用環境温度内の部屋に移動し、しばらく経ってから測定してください。
体温測定するとHiが表示される	測定した体温が43.0℃(温度計モードでは100.0℃)を超えています。	測定する部位、距離・角度などを守って、再度測定してください。
体温測定するとLoが表示される	測定した体温が32.0℃(温度計モードでは0.0℃)未満です。	測定する部位、距離・角度などを守って、再度測定してください。
“ ” バッテリーマークが点滅する	充電残量が少なくなっています。	専用充電ケーブルを使用して充電してください。
脇・その他の部位で測定した体温と違う	人の体温は、部位によって異なります。	普段から、脇下など他の部分での測定と同時に、本製品による額の測定も行い、その差を知っておいてください。
体温が実際より低く・高く測定される	測定する部位、角度・距離などが正しくないと、正しい測定ができません。	再度本書の「使いかた」をよくお読みになり、正しく測定してください。

仕様

医療機器分類	管理医療機器
認証番号	第307AFBZX00013000号
一般的名称	皮膚赤外線体温計
販売名	皮膚赤外線体温計 振動式体温計 PRO-M
型式名称	KJT0307
測定温度範囲	体温計モード：32.0～43.0℃ 温度計モード：0.0～100.0℃
最大許容誤差	体温計モード：±0.2℃(35.0～42.0℃)、±0.3℃(32.0～34.9℃、42.1～43.0℃) 温度計モード：±2.0℃
使用環境	温度：5.0～40.0℃、湿度：15～85% RH(結露なきこと)
輸送・保管環境	温度：-20.0～55.0℃、湿度：15～93%(結露なきこと)
最小表示単位	0.1℃
寸法	W37×D38×H151mm
質量	約76g
電源	リチウムイオン電池(DC3.7V、500mAh)
付属品	専用充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書
測定部位	額部
換算部位	腋窩
電撃に対する保護の程度	BF形装着部
防塵防水保護等級	IP22
メモリー	50件
電磁妨害	IEC60601-1-2：2014 / AMD1：2020

※ 本製品の仕様は、改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

※ 本書に使用されているイラストと実際の商品では、一部異なることがあります。